


SURGICRYL[®]

910

POLYGLACTINE

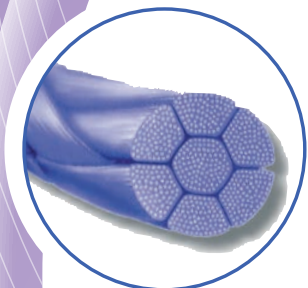

Tüüp	Punutud ja kaetud multifilament
Koostis	Polüglaktiin 910, kopolümeer — 90% glükooliidhape, 10% L-laktiidhape
Kate	Polüglükoolhape-ko-L-laktide kate koos <1% kaltsiumstearaadiga
Värv	Violetne
Koe reaktsioon	Minimaalne
Resorbeerumine	Materjal laguneb täielikult hüdrolyüüsi teel 56–70 päeva jooksul. Umbes 50% tõmbetugevusest säilib enamvähem 21 päeva möödudes.
Pakend	Karp sisaldab 12 niiti



*For quality
&
safety*

smi

www.sutures.be



OMADUSED

- ☒ Väga hea tõmbetugevus
- ☒ Sünteetiline
- ☒ Hüdrolüütiline lagunemine
- ☒ Punutud struktuur
- ☒ Kaetud punutud multifilament
- ☒ Hermeetiliselt suletud pakend

NÄIDUSTUSED Pehmekoe sulgemine ja/või ligeerimine, eriti:

- üldkirurgia
- pindmiste haavade õmblus
- seedetraktikirurgia
- plastiline kirurgia
- silmakirurgia
- günekoloogia / sünnitusabi
- ortopeedia
- uroloogia

EELISED

Suurepärane koosobivus

Minimaalne koereaktsioon

Prognoositav resorbeerumiskiirus

Suurepäraseid omadused:
elastne,
väga hästi käsitletav,
tugev

Läbib kudesid sujuvalt:

väiksem hõõrdumine ja vähendatud traumarisk,
hea sõlmekindlus,
vähendatud kapillaarne imendumine


Toote steriilsus tagatud

VASTUNÄIDUSTUSED Kardiovaskulaarne kirurgia
Neurokirurgia


Kuna tegemist on resorbeeruva niidiga, ei sobi olukordadesse, kus on vajalik pikaajaline haava toetus.

Ettevaatust patsientidega, kellel on aeglasem haavade paranemine (näiteks immuunpuudulikkus).

TÕMBETUGEVUS

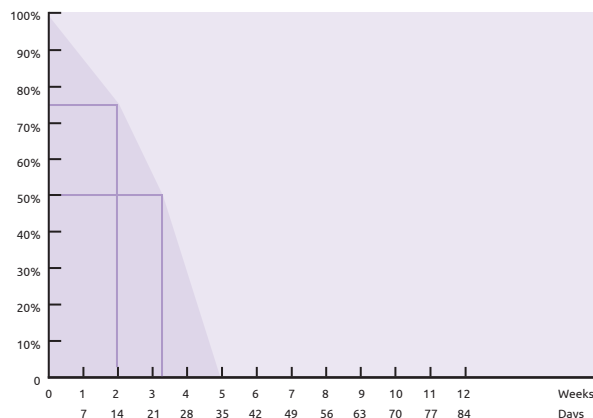

RESORBEERUMINE

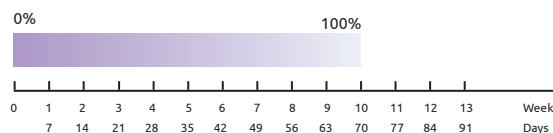

 Ümara struktuuriga otsa suunas kitsenev lõikepind		Metric	USP	Pikkus		Tellimiskood
 1/2 ring	HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150113
	HR 17 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200117
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300117
	HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200122
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300122

 Ümara struktuuriga lõikepind		Metric	USP	Pikkus		Tellimiskood
 3/8 ring	DR 17 mm	1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15150217
	DR 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200222

 Lõikepind: Reverse cutting		Metric	USP	Pikkus		Tellimiskood
 1/2 ring	HS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071412
	HS 17 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101417
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151417
	HS 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201422
	HS 23 mm	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501423
	HS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201426
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301426



Lõikepind: Reverse cutting

3/8 ring



			Metric	USP	Pikkus		Tellimiskood
3/8 ring	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	violet	15071512
			1	5/0	45 cm	violet	15101512
			1.5	4/0	45 cm	violet	15151512
	DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	violet	15071516
			1	5/0	75 cm	violet	15101516
			1.5	4/0	75 cm	violet	15151516
			2	3/0	45 cm	violet	15201516-45
	DS 16 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	värvitu	15201516UP
	DS 16 mm black		0.7	6/0	45 cm	violet	15071516VB
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	violet	15101519
			1.5	4/0	75 cm	violet	15151519
			2	3/0	75 cm	violet	15201519
	DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	värvitu	15151519UP
			2	3/0	50 cm	värvitu	15201519UP
	DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	violet	15101519VB
			1.5	4/0	75 cm	violet	15151519VB
	DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	15151524
			2	3/0	75 cm	violet	15201524
			3	2/0	75 cm	violet	15301524
	DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	värvitu	15201524UP



Ümara struktuuriga otsa suunas kitsenev lõikepind

1/2 ring



			Metric	USP	Pikkus		Tellimiskood
1/2 ring	HRT 13 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	15150513
	HRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	15150517
			2	3/0	75 cm	violet	15200517



Ümara struktuuriga otsa suunas kitsenev lõikepind

3/8 ring



			Metric	USP	Pikkus		Tellimiskood
3/8 ring	DRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	15150417
			2	3/0	75 cm	violet	15200417